

QUICK START GUIDE

Thank you for choosing AlcoSafe.

This guide provides you with the simple instructions for using AlcoSafe.

For more help and support please see the **Owner's Manual**

PARAMINT

www.paramint.se

AlcoSafe™


AlcoSafe KX6000S SNABBGUIDE

Det är viktigt att läsa hela manualen noggrant.

Användning

Vänta 20 minuter efter det att testpersonen rökt, ätit eller druckit alkohol. Detta är av stor vikt för att erhålla korrekta mätresultat.


1. Använd munnstycket i hålet på testarens övre vänstra sida.
2. Aktivera testaren genom att trycka på knappen i mitten i 1 sekund.
3. Tryck på den vänstra knappen för att förbereda test. Det tar normalt 20 - 40 sekunder. Det kan dröja längre om sensorn exponeras för hög alkoholkoncentration från tidigare test.
4. När "RDY" (klar) blir synligt och ett "pip" ljuder är testaren klar att användas.
5. Genomförande av test: Blås genom testarens munnstycke med ett konstant tryck i cirka 5 sekunder tills ett "pip" ljud hörs, vilket indikerar resultatet. Alternativt kan en konfigurerad blåsa-eindret vid påslutningsbågen i sådana fall, blås till testsignalen uppifrån. Läs av resultatet.

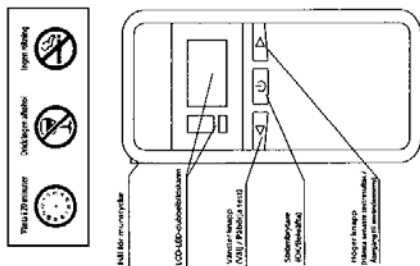

För att veta mellan de tillgängliga menyalternativen, tryck på den högra knappen under två sekunder. Se manualen för detaljer om menyalternativen.

OBS! KOR ALDRIG ALKOHOLPÅVERKAD.

AlcoSafe KX6000S PIKAOPAS

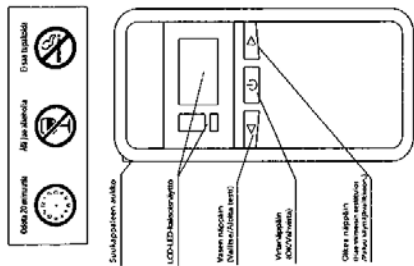

Jos haluat selata valikkoon, paina oikeaa näppäintä 2 sekunniksi. Lue käyttöohjeesta lisää valikkovaihtoehtoja.

HUOMI! ÄLÄ KOSKAAN AJA ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISENA.

AlcoSafe KX6000S HURTIGVEILEDNING

Sorg for at du leser hele bruksanvisningen nøye.

Bruksanvisning


Vent 20 minutter etter testpersonen har røykt, spist eller drukket for testingen. Dette er meget viktig for å kunne oppnå korrekte måleresultat.

1. Sett munnstykket i åpningen øverst på venstre side av apparatet.
2. Trykk på På-/avknappen i 1 sekund når du vil slå på apparatet.
3. Trykk på den venstre knappen når du skal varme opp leieren. Dette tar normalt 20 - 40 sekunder. Det kan ta lengre tid hvis apparatet har vært utsatt for høy alkoholkonsentrasjon i forrige test.
4. Når "RDY" (klar) vises, og apparatet gir en pipelyd, er det klart for bruk.
5. Utførelse av testen: Blås jevnt i munnstykket i 5 sekunder, inntil du hører "pipelyden". Alternativt kan testen heres med det samme du begynner å blåse, og i så fall blåser du til papirtenen stopper. Les av resultatet på skjermen.

Hvis du vil bli gjennomde tilgjengelige menyalternativer, trykker du på høyre knapp i 2 sekunder. Se i bruksanvisning for detaljer om menyalternativene.

OBS! DU MÅ ALDRIG KJØRE BIL NÅR DU HAR DRUKKET ALKOHOL.

AlcoSafe KX6000S QUICK GUIDE

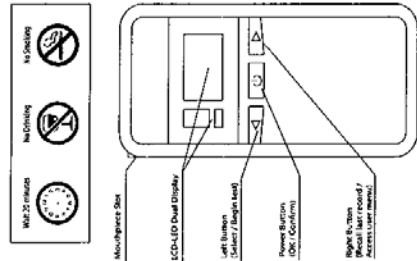

Be sure to read the entire owner's manual and follow procedures carefully to obtain optimal results.

Operating Instructions

Wait 20 minutes after the test subject smokes, eats or drinks before testing. Failure to wait 20 minutes can give inaccurate readings and damage the sensor.

1. Insert mouthpiece: Insert mouthpiece into the slot on upper left hand side of the unit.
2. Power on the unit: Press the Power button for 1 second to power on the unit.
3. Warm up the unit: Press the Left button to warm up the unit. The process normally takes 20-40 seconds. It could take more time when the unit is exposed to high alcohol concentration in previous test.
4. Ready to use: When "RDY" (Ready) appears with "beep" sound, the unit is ready to use.
5. Blowing for BAC result: Blow steadily through the mouthpiece for 5 seconds until "beep" sound is heard. BAC (Blood Alcohol Content) result is displayed.

To toggle through available menu options, press the Right button for 2 seconds. See owner's manual for details on the menu options.

DO NOT DRINK AND DRIVE.

⚠ SYSTEM MEDDELANDE 'SNR', 'SN' ⚠

Enheten kan rapportera systemmeddelanden av typ 'SNR' vilket betyder 'Sensor Inte Klar' när enheten inte har använts under en längre period.

Sensorn kan bli förorenad inom denna längre period, därför kan uppvärmningstiden (sensorns automatiska rengöringstid) förlängas och leda till ett 'SNR'-meddelande.

Det rekommenderas att utföra följande steg när 'SNR' visas:

- 1) När du ser ett "SNR"-meddelande, stäng av enheten.
- 2) Slå på enheten igen, uppvärmningsprocessen (sensorns automatiska rengöring) inleds vilket anges av timerns nedräkning.
- 3) Efter cirka 10 sekunders uppvärmning, blås med jämnt tryck i enheten genom munstycket i 4-5 sekunder.
- 4) Låt enheten fortsätta att värma upp tills enheten är klar för test!

Upprepa steg 1-4 om "SNR" eller "SN" fortfarande visas. Men om "SNR" eller "SN" visas 5 eller fler gånger i följd vid samma användningstillfälle efter att ha följt ovanstående procedur, kan enheten behöva service.

Detta är ett tillägg till bruksanvisningen. Läs bruksanvisningen helt och hållet före användning.

⚠ TÄRKEÄÄ 'SNR'-ilmoitus ⚠

Laitte saattaa antaa ilmoituksen "Snr" (tai Sn mallista riippuen) silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan. (Snr, sn – sensor not ready – sensori ei ole käyttövalmis)

Sensori saattaa likaantua, ellei laitetta ole käytetty pitkään aikaan, jolloin lämpenemisaika (sensorin automaattipuhdistukseen käyttämä aika) pitenee ja laite antaa "Snr"-ilmoituksen. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen lämpenemisaika lyhenee kuitenkin 20-40 sekuntiin.

Jos laite antaa "Snr"-ilmoituksen, käy läpi seuraavat vaiheet:

- 1) Kun "Snr"-ilmoitus tulee näkyviin, katkaise laitteesta virta.
- 2) Kytke laitteeseen uudelleen virta, lämpenemisprosessi alkaa.
- 3) Noin 10 sekunnin jälkeen voit puhalttaa laitteeseen 4-5 sekuntia suukappaleen kautta.
- 4) Anna laitteen jatkaa lämpenemistä, kunnes se on käyttövalmis!

Jos "Snr"-ilmoitus tulee uudelleen näkyviin, toista vaiheet 1-4. Jos ilmoitus kuitenkin tulee näkyviin viisi kertaa peräkkäin yhden käyttökerran yhteydessä, laite saattaa olla huollon tarpeessa.

Tämä on käyttöoppaan lisaosa. Luehan käyttöoppaan kokonaan ennen käyttöä.