

255x90mm

(UK) Face Mask

Type IIR approved in accordance with EN 14683:2019
Intended use: Prevention towards spread of infectious breath, cough and sneeze.

Protection against inhalation of airborne particles such as dust, pollen and transmittable bacteria and virus.

Instruction for use:

1. Wash your hands thoroughly before AND after wearing.
 2. Take hold of the mask at the upper edge, where the nasal clamp is felt and with the blue side facing outwards.
 3. Place the nasal clamp over the nasal ridge and apply pressure to fasten the mask.
 4. Holding the nasal clamp gently pull the lower edge of the mask downwards in order to expand the mask.
 5. Place the earstrings firmly around ears.
 6. Gently press the nasal bridge clamp around the nose to ensure a tight fit and adhesion.
 7. Spread and unfold until it covers the chin completely, leaving no gaps between the mask cheeks and chin.
 8. Dispose in closed bin
- Warning: Single use only. Do not use if the mask is dirty or broken. Non sterile.**
- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

(SE) Munskydd

Typ IIR godkänd i enlighet med EN 14683:2019

Användningsområde: Förebygger spridning av smittsam andedräkt, hosta och nysning.

Skyddar mot inandning av luftburna partiklar såsom damm, pollen och överföringsbara bakterier och virus.

Bruksanvisning:

1. Tvätta händerna noga före och efter användande.
2. Ta tag i maskens översta kant där näsklamman känns och med den blå sidan utåt.
3. Placera näsklamman över näsryggen och tryck för att sätta fast masken.
4. Håll näsklamman försiktigt och dra den nedre delen av masken nedåt för att utvidga masken.
5. Placera öronbanden runt om öronen.
6. Tryck försiktigt på näsbrösklamman runt nästan för att säkerställa så det håller tätt.

7. Vik ut tills hakan täcks utan att det är mellanrum mellan mask kinder och haka.
 8. Släng i stängd papperskorg.
- Endast för engångsbruk. Använd inte om masken är smutsig eller trasig. Ej steril.**
- Om någon olycka skulle inträffa som har ett samband med enheten, skall det rapporteras till producenten och den sakkunniga myndigheten, där användaren och / eller patienten befinner sig.

(NO) Munnbind

Type IIR godkjent i samsvar med EN 14683:2019
Anvendelsesformål: Forebygge spredning av smittsom andedrett, hoste og nysing.

Beskyttelse mot innånding av luftbårne partikler som støv, pollen og transmitterbare bakterier og virus.

Bruksanvisning:

1. Vask hendene grundig før OG etter bruk.
 2. Ta tak i maskens øverste kant, hvor neseklammen er markert og med den blå siden utover.
 3. Plasser neseklammen over neseryggen, og trykk for å feste masken.
 4. Hold forsiktig i neseklammen, og trekk i den nedre kanten av masken for å utviden den.
 5. Plasser ørestrikkene godt rundt ørene.
 6. Trykk forsiktig på neseklammen rundt nesen for å sikre en tett passform og plassering.
 7. Spre og brett ut til den dekker haken fullstendig, uten at det er mellomrom mellom maskens skinn og hake.
 8. Kastes i lukket søppelbøtte.
- Advarsel: Kun til engangsbruk. Må ikke brukes hvis masken er skitten eller ødelagt. Ikke steril.**
- Enhver alvorlig hendelse som yinner sted i forbindelse med produktet, skal rapporteres til produsenten og den aktuelle myndighet hvor brukeren og / eller pasienten oppholder seg.

(FI) Suu-nenäsuojus

Tyyppi IIR, hyväksytty standardin EN 14683:2019 mukaisesti

Käyttötarkoitus: Infektioituneen hengityksen, yskän ja roiskeiden leviämisen estäminen. Suojaa ilmassa leijuvasta pölystä, siitepölystä sekä bakteereita.

Käyttöohje:

1. Pese kätesi huolellisesti ennen ja jälkeen käytön.
 2. Tartu maskin yläreunaan nenävahvikkeen kohdalta, sininen puoli ulospäin.
 3. Sijoita nenätuki nenän yli ja kiristä paikoilleen.
 4. Pidä nenästä kiinni ja vedä maskia alareunasta laajentaaksesi sitä.
 5. Kiinnitä nauhat korvien ympäri tukevasti.
 6. Paina nenävahviketta kevyesti, jotta maski on tukevasti paikallaan.
 7. Levitä maskia kunnes se peittää leuan kokonaan, tarkasta ettei leuan ja maskin väliin jää aukkoja.
 8. Hävitä suljetussa rokkissa.
- Varoitus: Kertakäyttöinen. Älä käytä rikkiinäästä tai likaista maskia. Ei steriili.**
- Mikäli käytön yhteydessä ilmenee vakavia ongelmia, ota yhteys tuotteen valmistajaan sekä paikallisiin viranomaisiin.

(DE) Mund-Nasen-Schutz

Typ IIR zugelassen nach EN 14683:2019

Wird gebraucht für: Vorbeugung gegen die Verbreitung von infektiösem Atem, Husten und Niesen. Schutz vor Einatmen von luftgetragenen Partikeln wie Staub, Pollen und übertragbaren Bakterien und Viren.

Gebrauchsanweisung:

1. Waschen Sie sich vor UND nach dem Tragen gründlich die Hände.
2. Halten Sie die Maske am oberen Rand, wo sich die Nasenklammer befindet. Die blaue Seite zeigt nach außen.
3. Legen Sie die Nasenklammer über den Nasenrücken und üben Sie Druck aus, um die Maske zu befestigen.
4. Halten Sie den Nasenbügel und ziehen Sie den unteren Rand der Maske vorsichtig nach unten, um die Maske zu erweitern.
5. Die Ohrbänder fest um die Ohren legen.
6. Die Nasenrückenklammer sanft um die Nase drücken, um einen festen Sitz und Haftung zu gewährleisten.
7. Spreizen und entfalten Sie die Maske, bis sie das Kinn vollständig bedeckt und keine Lücken zwischen den Wangen und dem Kinn sind.
8. In geschlossenem Behälter entsorgen


Warnung: Nur zur einmaligen Verwendung. Nicht verwenden, wenn die Maske verschmutzt oder kaputt ist. Unsteril.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Artikel aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.



clas ohlson

Art.no 41-8001 17.5x9.5cm
41-8001-1 14.5x9cm

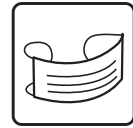

RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd.
7 Lanjiang Road, Yuecheng District,
Shaoxing, Zhejiang, China 312000


EC REP
RFX+CARE International A/S
Bakkegaardsvej 408,
3050 Humlebaek, Denmark

RFX+CARE™

Distributor: Clas Ohlson AB,
SE-793 85 Insjön, Sweden

clas ohlson

FACE MASK IFU
Revised Version: V01

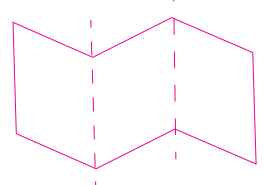

85x90mm

