

S Blodtrycksmätare
Bruksanvisning



Innehåll

1. Lära känna enheten	2
2. Viktig information	2
3. Produktbeskrivning	5
4. Förbereda mätning	6
5. Mäta blodtrycket	8
6. Bedöma resultat	9

Bästa kund!

Vi gläder oss över att ni har bestämt er för att köpa en produkt ur vårt sortiment. Vårt namn står för noggrant kontrollerade och högklassiga kvalitetsprodukter från de olika områdena värme, vikt, blodtryck, kroppstemperatur, puls, mjuk terapi, massage och luft.

Var vänlig och läs igenom den här manualen noggrant. Spara på den för senare användning och se till att den blir tillgänglig för andra personer, som använder vågen och var vänlig och iaktta de instruktioner, som ges.

Med vänlig hälsning
Ert Beurer-team

1. Lära känna enheten

Kontrollera att produktförpackningen är oskadad och att alla delar finns med.

Blodtrycksmätaren för överarmsbruk är avsedd för indirekt mätning och övervakning av arteriellt blodtryck hos vuxna människor.

7. Hämta och radera mätvärden	10
8. Rengör och förvara mätaren och manschetten	11
9. Problemlösning	12
10. Tekniska data	12
11. Adapter	13

Du kan mäta ditt blodtryck snabbt och enkelt och visa det senaste mätvärdet.

Om enheten detekterar en hjärtrytmstörning får du en varning. De framtagna värdena klassificeras och visas grafiskt.

2. Viktig information

Teckenförklaring

I bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten till apparaten och tillbehören används följande symboler.

	Var försiktig!
	Anvisning Anvisning om viktig information
	Följ bruksanvisningen

	Applicerad del, typ BF
	Likström
	Avfallshantera produkten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE.
	Tillverkare
Storage 	Godkänd temperatur och luftfuktighet för förvaring
Operating 	Godkänd temperatur och luftfuktighet för förvaring
	Skydda mot fukt
	Serienummer
	CE-märkningen anger att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i direktivet 93/42/EEC om medicintekniska produkter.

Användning

- Mät alltid blodtrycket vid samma tid på dagen för att värdena ska bli jämförbara.
- Vila ca 5 minuter före varje mätning!

- Om du vill utföra flera mätningar på en person ska du vänta fem minuter mellan varje mätning.
- Minst 30 minuter före mätningen ska du inte äta, dricka, röka eller anstränga dig fysiskt.
- Upprepa mätningen om de uppmätta värdena är tvetydiga.
- De värden som du får vid dina egna mätningar är endast avsedda som information. De ersätter inte en läkarundersökning! Diskutera dina uppmätta värden med en läkare. Fatta aldrig egna medicinska beslut (t.ex. om läkemedel eller dosering) baserat på mätningar som du utfört själv!
- Använd inte blodtrycksmätaren på spädbarn eller kvinnor med preeklampi (havandeskapsförgiftning). Före användning av blodtrycksmätaren under graviditet rekommenderar vi att detta godkänns av en läkare.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga, eller som saknar erfarenhet av och/eller kunskap om hur en sådan här produkt används, såvida de inte övervakas av eller får anvisningar om hur produkten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet kan leda till felmätningar och till försämringar av mätnoggrannheten. Detta gäller även vid mycket lågt blodtryck, diabetes, genombloednings- och rytmstörningar samt frossa eller darrningar.
- Blodtrycksmätaren får inte användas tillsammans med en högfrekvent kirurgiapparat.
- Använd enbart blodtrycksmätaren på personer som har ett överarmsomfång som stämmer överens med de mått som anges för mätaren.

- Observera att den berörda extremiteten kan hindras i sin funktion under uppumpningen.
- Blodcirkulationen får inte hindras onödigt länge under blodtrycksmätningen. Vid fel på apparaten tar du av manschetten från armen.
- Undvik att klämma, trycka ihop eller vika manschettslangen.
- Undvik ett långvarigt tryck i manschetten och mät inte för ofta. De störningar i blodflödet som detta orsakar kan leda till skador.
- Manschetten får inte användas på en arm vars artärer eller vener behandlas medicinskt, t.ex. intravaskulärt ingrepp, en intravaskulär behandling eller en shunt.
- Använd inte manschetten på personer som har genomgått en bröstamputation.
- Använd inte manschetten över sår, eftersom det kan leda till ytterligare skador.
- Placera manschetten enbart på din överarm. Placera inte manschetten på andra delar av kroppen.
- Blodtrycksmätaren kan användas med batterier eller med en nätdel. Tänk på att det endast är möjligt att överföra och spara data när blodtrycksmätaren har tillgång till ström. När batterierna är förbrukade eller nätdelen kopplas från elnätet försvinner datum och klockslag från blodtrycksmätaren.
- För att spara batterierna stängs blodtrycksmätaren av automatiskt efter tre minuter om ingen knapptryckning har gjorts.
- Mätaren är endast avsedd att användas på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer vid olämplig eller felaktig användning.



Förvaring och skötsel

- Blodtrycksmätaren innehåller precisions- och elektronikkomponenter. Noggrannheten i mätvärdena och livslängden hos enheten är beroende av att enheten hanteras på ett omsorgsfullt sätt:
 - Skydda enheten från stötar, fukt, smuts, starka temperaturväxlingar och direkt solljus.
 - Se till att du inte tappar enheten.
 - Använd inte enheten i närheten av starka elektromagnetiska fält – håll den på avstånd från radioanläggningar och mobiltelefoner.
 - Använd bara de medföljande manschetterna eller originalreservmanschetter. I annat fall visas felaktiga mätvärden.
- Om enheten inte kommer att användas under en längre tid, rekommenderar vi att batterierna tas ur.



Anvisningar för hantering av batterier

- Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon ska det berörda stället sköljas med rikliga mängder vatten. Uppsök läkare.
- ⚠ **Risk för sväljning!** Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Förvara därför batterier oåtkomligt för små barn!
- Lägg märke till polsymbolerna plus (+) och minus (-).
- Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa. Skyddshandskar ska bäras vid rengöringen.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.
- ⚠ **Risk för explosion!** Kasta inte batterier i öppen eld.
- Batterier får inte laddas upp eller kortslutas.


- Om produkten inte ska användas under längre tid ska batterierna tas ut från batterifacket.
- Använd enbart samma eller en motsvarande batterityp.
- Byt ut alla batterier samtidigt.
- Använd inte uppladdningsbara batterier!
- Batterierna får inte öppnas eller tas isär.

Reparationer och avfallshantering

- Batterier får inte kastas i hushållsavfallet. Lämna förbrukade batterier till den lokala batteriinsamlingen eller återvinningscentralen.
- Öppna inte enheten. Om denna anvisning inte följs upphör garantin att gälla.
- Du får inte själv reparera eller justera enheten. Om du gör så kan en problemfri funktion inte längre garanteras.
- Reparationer får endast göras av Beurers kundtjänst eller av auktoriserade återförsäljare. Före reklamation – kontrollera först att batterierna fungerar och byt dessa om så behövs.
- Av miljöskäl får produkten inte kastas i hushållsavfallet. Lämna den i stället till en återvinningscentral. Produkten ska avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering kan du vända dig till ansvarig kommunal myndighet.




3. Produktbeskrivning

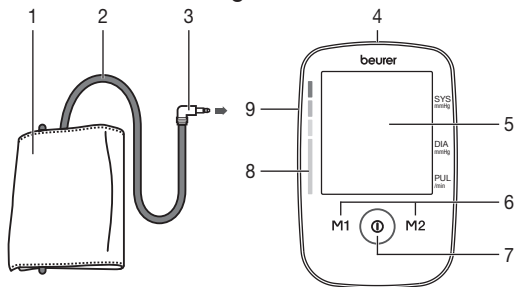

1. Manschett
2. Manschettslang
3. Manschettkontakt
4. Uttag för nät-del
5. Display
6. Minnesknappar **M1/M2**
7. START/STOPP-knapp 
8. Riskindikator
9. Anslutning för manschettkontakt (vänster sida)

Indikeringar på displayen:

1. Datum / klockslag
2. Systoliskt tryck
3. Diastoliskt tryck
4. Uppmätt puls
5. Symbol för puls ♥
6. Släppa ut luft (pil)
7. Minnesplatsens nummer/Minnesvisning medelvärde (F), morgon (FM), kväll (PM)
8. Symbol, dags för batteribyte
9. Användarminne
10. Riskindikator
11. Symbol för hjärtrytmstörning

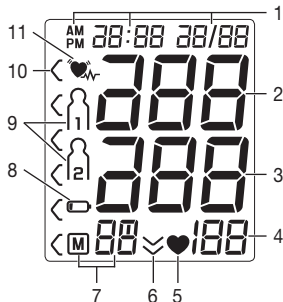

När symbolen för batteribyte visas går det inte utföra fler mätningar förrän alla batterier har bytts ut. Varje gång batterierna avlägsnas ur produkten måste datum och klockslag ställas in på nytt. De sparade mätresultaten försvinner inte.

! Batteriåtervinning

- De förbrukade, helt urladdade batterierna ska kasseras separat i speciellt märkta insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka till affären. Batterier ska enligt lag kasseras på särskilt sätt.
- Följande teckenkombinationer förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen:
Pb = batteriet innehåller bly
Cd = batteriet innehåller kadmium
Hg = batteriet innehåller kvicksilver.



Ställa in timformat, datum och klockslag

I den här menyn har du möjlighet att ställa in följande funktioner efter varandra.

Timformat



Datum



Klockslag

Du bör alltid ställa in datum och klockslag. Bara på det sättet kan du spara dina mätvärden korrekt med datum och klockslag och ta fram dem senare.




Om du håller ned minnesknappen **M1** eller **M2** kan du ställa in värdena snabbare.

4. Förbereda mätning

Sätta i batterierna

- Ta bort batterifackets lock på produktens baksida.
- Sätt i fyra batterier av typ 1,5V AA (alkaliska typ LR 06). Kontrollera noga att du sätter i batterierna med polerna åt rätt håll enligt märkningen. Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Sätt tillbaka batterifackets lock ordentligt.

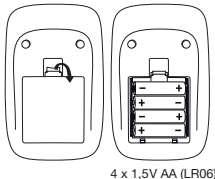

4 x 1,5V AA (LR06)

- Håll ned START/STOPP-knappen ① i 5 sekunder.
- Använd minnesknapparna **M1/M2** för att välja önskat timformat och bekräfta med START/STOPP-knappen ①.



Årtalet blinkar på displayen.

- Använd minnesknapparna **M1/M2** för att välja önskat årtal och bekräfta med START/STOPP-knappen ①.

Månaden blinkar på displayen.

- Använd minnesknapparna **M1/M2** för att välja önskad månad och bekräfta med START/STOPP-knappen ①.

Tagen blinkar på displayen.

- Använd minnesknapparna **M1/M2** för att välja önskad dag och bekräfta med START/STOPP-knappen ①.

- ① Om 12 timmar är inställt som timformat är ordningsföljden för visning av dag och månad omvänd.



Timmen blinkar på displayen.

- Använd minnesknapparna **M1/M2** för att välja önskad timme och bekräfta med START/STOPP-knappen ①.

Minut blinkar på displayen.

- Använd minnesknapparna **M1/M2** för att välja önskad minutangivelse och bekräfta med START/STOPP-knappen ①.



Användning med nätدل

Den här produkten kan även användas med en nätدل.

Då får det inte finnas några batterier i batterifacket. Nätdelen med beställningsnummer 071.19 kan erhållas via fackhandeln eller från serviceadressen.

- Blodtrycksmätaren får enbart användas med den här angivna nätdelen för att undvika att blodtrycksmätaren skadas.
- Anslut nätdelen till det avsedda uttaget på blodtrycksmätarens högra sida. Nätdelen får enbart anslutas till den nätspänning som anges på typskylten.
- Anslut sedan nätdelens stickkontakt till ett eluttag.
- När du har använt blodtrycksmätaren drar du först ut nätdelen ur eluttaget och sedan ur blodtrycksmätaren. När nätdelen kopplas ur försvinner datum och klockslag från blodtrycksmätaren. De sparade mätvärdena finns dock kvar.


5. Mäta blodtrycket

Produkten måste ha uppnått rumstemperatur innan du utför mätningen.


Du kan utföra mätningen på vänster eller höger arm.

5.1 Sätta på manschetten


Lägg manschetten runt den blottade vänstra överarmen. Genomblödningen får inte hindras av strama kläder eller liknande.

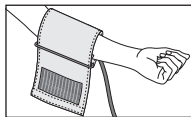


Manschetten skall placeras på överarmen, så att dess nedre kant ligger 2–3 cm över armbågen och över artären. Slangen skall ligga mot handflatans mitt.

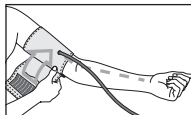

Placera manschetten tätt men inte för hårt runt armen och fäst den med kardborrbandet. Manschetten sitter fast ordentligt när man precis kan föra in två fingrar mellan manschetten och armen. För in slangen i motsvarande öppning på manschetten.

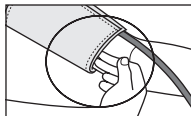

Stick nu in manschettsslangen i anslutningen för manschettstickproppen.

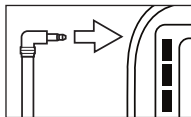

i Om du utför mätningen på höger överarm sitter slangen på insidan av armbågen. Se till att armen inte trycker mot slangen.



Blodtrycket kan skilja sig åt mellan vänster och höger arm, och därför kan det uppmätta blodtrycksvärdet bli olika stort. Utför alltid mätningen på samma arm.

Om värdena skiljer sig mycket åt mellan de båda armarna bör du kontakta läkare för att ta reda på vilken arm du bör utföra mätningen på.

Obs! Produkten får endast användas med originalmanschetten. Manschetten är avsedd för ett armomfång på mellan 22 och 36 cm.

Via beställningsnumret 163.387 kan en större manschett för överarmsomfång mellan 35 och 44 cm erhållas via fackhandeln eller serviceadressen.

5.2 Rätt kroppshållning

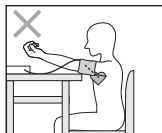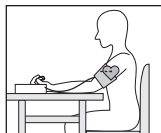

- Vila i ca 5 minuter före varje mätning! Annars kan mätningen visa felaktiga värden.
- Mätningen kan göras i sittande eller liggande. Tillse i båda fallen att manschetten befinner sig i höjd med hjärtat.
- Sitt bekvämt vid blodtrycksmätningen. Vila rygg och armar. Kors inte benen. Placera fötterna på golvet.
- För att få ett så rättvisande resultat som möjligt är det viktigt att du håller dig still och inte pratar under mätningen.

Mäta blodtrycket

Mätning

Placera manschetten enligt ovanstående beskrivning och inta önskad kroppsställning inför mätningen.

- Starta blodtrycksmätaren genom att trycka på START/STOPP-knappen ①. Alla sektioner på displayen blinkar kort.



Efter tre sekunder börjar blodtrycksmätaren mäta blodtrycket automatiskt.

Manschetten pumpas upp automatiskt.

- ① Du kan när som helst avbryta mätningen genom att trycka på START/STOPP-knappen ①.

Lufttrycket i manschetten släpps långsamt ut. Om en antydan till högt blodtryck upptäcks pumpas manschetten upp igen, den här gången till ett högre tryck. Så snart mätaren kan uppmäta pulsen visas symbolen för puls ♥.

- Mätresultaten för systoliskt tryck, diastoliskt tryck samt puls visas.



- E _ visas om mätningen inte kunde genomföras korrekt. Läs igenom avsnittet Felmeddelanden/felavhjälpning i denna bruksanvisning och upprepa sedan mätningen.



Mätning

- Välj önskat användarminne genom att trycka på någon av minnesknapparna **M1** eller **M2**. Om du inte väljer något användarminne kommer mätvärdet att lagras i det användarminne som senast användes. Motsvarande symbol **M1** eller **M2** visas på displayen.
- Starta blodtrycksmätaren genom att trycka på START/STOPP-knappen ①. Då sparas mätvärdet i det valda användarminnet.
Om du glömmar att stänga av produkten stängs den av automatiskt efter ungefär tre minuter. Även i det fallet sparas först mätvärdet i det valda eller senast använda användarminnet.
- Vänta i minst 5 minuter innan du utför en ny mätning!



6. Bedöma resultat

Hjärtrytmstörningar:

Denna enhet kan identifiera eventuella störningar i hjärtrytmen vilket i så fall anges med symbolen ♥_ efter mätningen. Detta kan vara en indikator för en arytm. Arytmi är en sjukdom vid vilken hjärtrytmen är onormal till följd av fel i det bioelektriska systemet som styr hjärtslagen. Symtomen (hjärklappning, extraslag, långsammare eller snabbare puls) kan bl.a. bero på hjärtsjukdomar, ålder, överdrivet intag av njutningsmedel, stress och sömnbrist. Arytmier kan bara fastställas vid en läkarundersökning.

Gör om mätningen om symbolen  visas på displayen efter mätningen. Tänk på att vila 5 minuter före mätningen och att inte prata eller röra dig under mätningen. Om symbolen  visas ofta ska du vända dig till din läkare. Självdiagnos och egenbehandling baserat på mätresultat kan vara skadligt. Följ alltid anvisningarna du får av din läkare.

Riskindikator:

Mätresultaten kan klassificeras och bedömas enligt följande tabell.

De här standardvärdena är dock endast avsedda som allmänna riktlinjer, eftersom det individuella blodtrycket avviker mellan olika personer och olika åldersgrupper osv.

Det är viktigt att du har kontakt med din läkare med jämna mellanrum. Din läkare upplyser dig om vilket blodtrycksvärde som är normalt för dig, samt om vilket värde ditt högsta blodtryck får ha innan det kan anses vara skadligt för dig.

I stapeldiagrammet på displayen och skalan på produkten visas inom vilket område det uppmätta blodtrycket finns. Om värdet för det systoliska och diastoliska trycket skulle hamna inom två olika områden (t.ex. det systoliska trycket inom Högst normalt och det diastoliska inom Normalt) visas alltid det högre området på den grafiska indelningen på produkten, i exemplet Högst normalt.

Område för blodtrycksvärden	Systoliskt (i mmHg)	Diastoliskt (i mmHg)	Åtgärd
Nivå 3: svår hypertoni	≥ 180	≥ 110	uppsök läkare
Nivå 2: måttlig hypertoni	160–179	100–109	uppsök läkare

Område för blodtrycksvärden	Systoliskt (i mmHg)	Diastoliskt (i mmHg)	Åtgärd
Nivå 1: mild hypertoni	140–159	90–99	Regelbunden kontroll hos läkare
Högt normalt	130–139	85–89	Regelbunden kontroll hos läkare
Normalt	120–129	80–84	Egenkontroll
Optimalt	<120	<80	Egenkontroll

Källa: WHO, 1999 (World Health Organization)

7. Hämta och radera mätvärden

Användarminne

Resultaten från varje genomförd mätning sparas tillsammans med datum och klockslag. Vid mer än 60 mätuppgifter skrivs de äldsta uppgifterna över.

- Om du vill gå till minnesläget måste du först starta blodtrycksmätaren. Tryck på START/STOPP-knappen .
- Efter helbildsvisningen väljer du inom 3 sekunder, med hjälp av minnesknapp **M1** eller **M2**, önskat användarminne ( ).
- Om du vill se mätdata för användarminnet  trycker du på minnesknappen **M1**.
- Om du vill se mätdata för användarminnet  trycker du på minnesknappen **M2**.

Den senaste mätningen visas på displayen.




- Tryck på minnesknappen (**M1** eller **M2**).

① Om du har valt användarminne1 trycker du på minnesknapp **M1**.

Om du har valt användarminne2 trycker du på minnesknapp **M2**.

Ett **A** blinkar på displayen.

Nu visas genomsnittsvärdet för alla de mätvärden som finns sparade i det aktuella användarminnet .

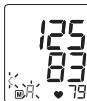

- Tryck på minnesknappen (**M1** eller **M2**).

AM blinkar på displayen.

Genomsnittsvärdet för de senaste sju dagarnas morgonmätningar visas (morgon: 05:00–09:00).



- Tryck på minnesknappen (**M1** eller **M2**).

PM blinkar på displayen.

Genomsnittsvärdet för de senaste sju dagarnas kvällsmätningar visas (kväll: 18:00–20:00).



Enskilda mätvärden

- Om du trycker på en minnesknapp (**M1** eller **M2**) igen visas den senaste enskilda mätningen på displayen (här i exemplet mätning 03).



- Om du trycker på en minnesknapp igen (**M1** eller **M2**) kan du se de uppmätta enskilda mätvärdena.
- För att stänga av produkten igen trycker du på START/STOPP-knappen ①.

① Du kan när som helst lämna menyn genom att trycka på START/STOPP-knappen ①.

- Om du vill rensa ett minne i respektive användarminne väljer du önskat användarminne.
- Börja med att ta fram ett enskilt mätvärde.
- Håll ned minnesknapparna **M1** & **M2** i 5 sekunder.

Alla värden för det visade användarminnet raderas.



Radera mätvärden

8. Rengör och förvara mätaren och manschetten

- Rengör mätaren och manschetten försiktigt och endast med en lätt fuktad duk.
- Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.
- Sänk aldrig ned mätaren och manschetten i vatten eftersom vätska då kan tränga in i och förstöra dem.

- När mätaren och manschetten förvaras får inga tunga föremål ligga ovanpå dem. Ta ur batterierna. Manschettsslangen får inte vikas.

9. Problemlösning

Vid fel visas ett felmeddelande E__ på displayen.

Felmeddelanden kan visas om

- pulsen inte kan registreras: **E1**
- du rör dig eller pratar under mätningen: **E2**
- manschetten sitter för hårt eller för löst: **E3**
- fel uppträder under mätningen: **E4**
- uppumpningstrycket överstiger 300 mmHg: **E5**
- batterierna  håller på att ta slut: **E6**.

Upprepa mätningen i dessa fall. Se till att manschettsslangen sitter ordentligt på plats och att du inte rör dig eller pratar. Ta ut och sätt i batterierna igen eller byt ut dem om det behövs.

10. Tekniska data

Modellnr	BM 45
Typ	M1501
Mätmetod	Oscillometrisk, indirekt blodtrycksmätning på överarmen
Mätområde	Manschetryck 0–300 mmHg, systoliskt 60–250 mmHg, diastoliskt 40–199 mmHg, Puls 30–180 slag/minut
Displayens noggrannhet	systoliskt ± 3 mmHg, diastoliskt ± 3 mmHg, puls $\pm 5\%$ av det angivna värdet

Mätosäkerhet	max. tillåten standardavvikelse enligt klinisk prövning: systoliskt 8 mmHg / diastoliskt 8 mmHg
Minne	2 x 60 minnesplatser
Dimensioner	L 165 mm x B 107 mm x H 50 mm
Vikt	Ungefär 288 g (utan batterier)
Manschettstorlek	22 till 36 cm
Till. driftsförhållanden	+10 °C till +40 °C, $\leq 85\%$ relativ luftfuktighet (ej kondenserande)
Förvaring/transport	-20 °C till +50 °C, $\leq 85\%$ relativ luftfuktighet), 800–1050 hPa omgivningstryck
Strömförsörjning	4 x 1,5V  AA-batterier
Batteriernas livslängd	Räcker ca. 250 mätningar, beroende på blodtryckets höjd och uppumpningstrycket
Tillbehör	Bruksanvisning, 4 x 1,5V AA-batterier, Förvaringsväska
Klassificering	Intern försörjning, IPX0, ej AP eller APG, kontinuerlig drift, applicerad del typ BF (manschett), klass II (när nätdelen används)

Vi förbehåller oss rätten att på grund av aktualiseringar ändra de tekniska uppgifterna utan föregående meddelande.

- Denna produkt motsvarar den europeiska standarden EN60601-1-2 och särskilda försiktighetsåtgärder gäller beträffande den elektromagnetiska kompatibiliteten. Tänk på att bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning kan påverka mätaren. Mer detaljerad information kan beställas på

den angivna kundserviceadressen. Informationen finns också att läsa i slutet av bruksanvisningen på sidorna 105–107.

- Apparaten motsvarar EU-direktivet för medicintekniska produkter 93/42/EEC, medicinproduktlagen och standarden SS-EN 1060-1 (Blodtrycksmätare för indirekt blodtrycksmätning – Del 1: Allmänna krav), SS-EN 1060-3 (Blodtrycksmätare för indirekt blodtrycksmätning, del 3: Kompletterande krav på elektromekaniska blodtrycksmätsystem) och IEC80601-2-30 (Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, del 2–30: Säkerhet och väsentliga prestanda – Särskilda fordringar på utrustning för automatisk icke-invasiv blodtrycksövervakning).
- Exaktheten hos den här blodtrycksmätaren har kontrollerats noggrant och den har utvecklats för att få en lång livslängd. Vid användning av apparaten inom medicinen ska mättek-niska kontroller utföras med lämpliga hjälpmedel. Närmare uppgifter om hur man kontrollerar exaktheten kan du från serviceadressen.

11. Adapter

Modellnr	FW 7575M/EU/6/06
Ingång	100–240V, 50–60 Hz
Utgång	6V DC, 600 mA, endast tillsammans med blodtrycksmätare från Beurer.
Tillverkare	Friwo Gerätebau GmbH
Skydd	Apparaten är dubbelt skyddsisolerad och är försedd med en temperatursäkring på primärsidan som kopplar bort apparaten från nätspänningen i händelse av fel. Kontrollera att batterierna är borttagna från batterifacket innan du använder adaptern.
	Likspänningsanslutningens polaritet
	Skyddsisolerad/skyddsklass 2
Hölje och skyddskåpa	Adapterhöljet skyddar från beröring av spänningssatta delar (t.ex. med fingrar, naglar eller metallföremål). Användaren får inte samtidigt vidröra patienten och utgångskontakten på AC-adaptern.

